

Mylan HIV Self Test

é o único dispositivo de autoteste de HIV integrado do mundo¹



Seguro¹



Conveniente¹



Preciso¹

- ✓ Remove a necessidade de vários componentes¹
- ✓ Reduz os erros do usuário¹
- ✓ Simplifica os procedimentos de teste¹
- ✓ Melhora a precisão do teste¹

O Mylan HIV Self Test é Fácil de Usar

Passo 1

Pressione o botão cinza para furar no dedo com lanceta integrada¹
Empurrar com força




IMPORTANTE
Só fura uma vez!



Passo 2

Encher tubo de sangue com sangue. Se o tubo de sangue não estiver cheio, aperte o dedo e adicione mais sangue.¹

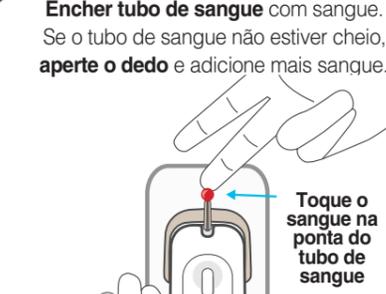

Toque o sangue na ponta do tubo de sangue

Passo 3

Faça o teste na mesa. Agora vire o tubo de sangue para o poço.¹




Virar

IMPORTANTE
Verifique se o sangue passou do tubo para o poço

Passo 4

Adicionar 4 gotas de fluido de teste no poço¹

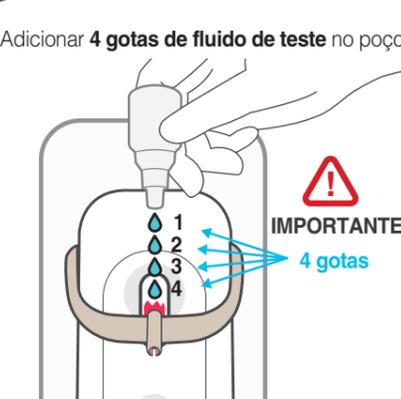

IMPORTANTE
4 gotas

Passo 5

Espere 15 minutos antes de ler o resultado. Não espere mais de 20 minutos¹.



IMPORTANTE

— HIV negativo

Se uma linha aparecer no C, você testou HIV negativo. Não deve haver linha no T.

Este é um teste de triagem.

Teste novamente após 3 meses.

Consulte o cartão de cuidados incluído para obter informações adicionais




? O teste não funcionou

Se nenhuma linha aparecer no C, o teste não funcionou.

Este é um teste de triagem. Vá a uma clínica para mais testes.



Consulte o cartão de cuidados incluído para obter informações adicionais

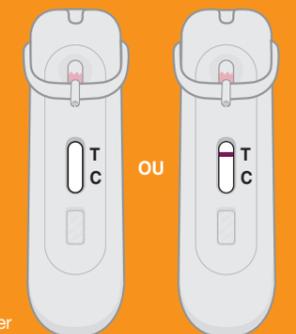


+ HIV positivo

Se aparecerem duas linhas, mesmo que fracas, você testou HIV positivo.

Este é um teste de triagem. Vá a uma clínica para mais testes.



Consulte o cartão de cuidados incluído para obter informações adicionais

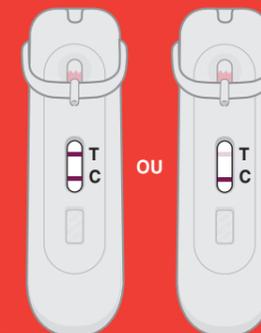


Para obter mais informações e assistir ao vídeo do procedimento de teste passo a passo, visite: <https://www.mylanez2uz.com>

Nota Importante: Lave e seque as mãos antes de realizar o teste. As instruções de uso que acompanham a embalagem devem ser lidas com atenção antes de realizar o teste. Este é um teste de triagem. Se o seu resultado for interpretado como “HIV negativo”, faça o teste após 3 meses. Se o resultado for interpretado como “O teste não funcionou” ou “HIV positivo”, vá a uma clínica para mais testes.

Mylan HIV Self Test

é reconhecido pelo desenho inovador*

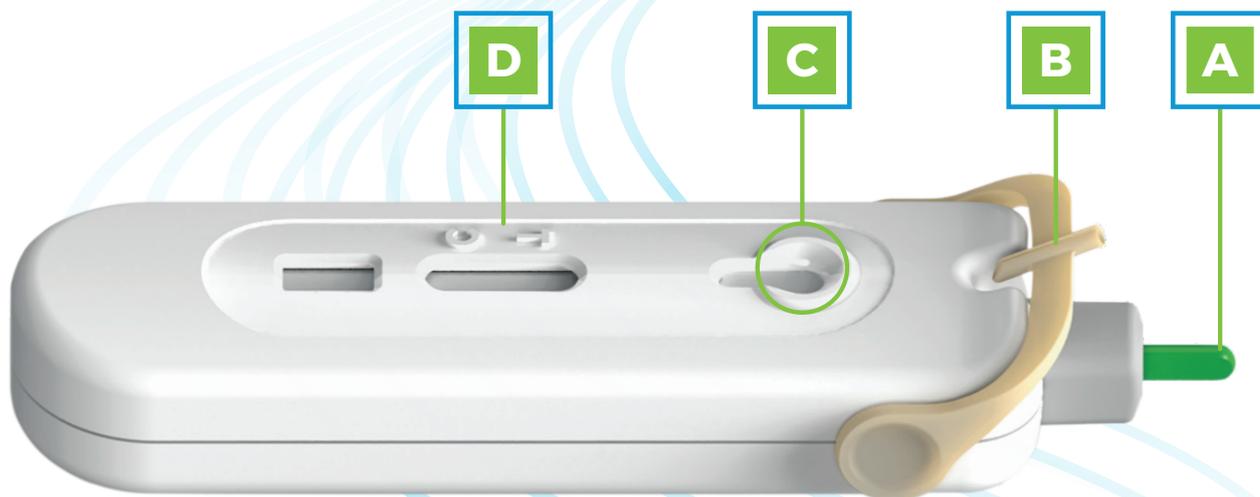**A**

Lanceta de Segurança Embutida¹

A lanceta de segurança auto-retrátil elimina o risco de ferimentos com objectos cortantes perigosos, travando a agulha dentro do dispositivo após o uso para descarte seguro.

B

Recolha de Sangue Precisa¹

A unidade de recolha de sangue fácil de usar é projectada para colectar exactamente o volume de amostra correcto (10 µl), garantindo o desempenho ideal do teste.

C

Entrega de Sangue Fácil¹

O sangue é distribuído de forma limpa para a tira de teste simplesmente girando a unidade de recolha de sangue.

D

Fácil Interpretação do Resultado¹

O resultado do teste é exibido claramente em apenas 15 minutos.

^{*1}

Referências:

1. Dados em arquivo.

2. Relatório Público da OMS PQ; Versão 1.0; Julho de 2019.

Disponível em: https://www.who.int/diagnostics_laboratory/evaluations/pq-list/190708_pqdx_0320_090_00_pqpr_mylan_hiv_self_test.pdf; Acessado em 1 de abril de 2020

Para mais informação, por favor contatar:

Mylan Pharmaceuticals Private Limited

No. 32/1 & 2, 34/1 to 4, 7th to 12th Floor,
Prestige Platina Block 3, Kadubeesanahalli Village,
Varthur Hobli, Outer Ring Road, Bangalore East Taluk,
Bangalore – 560 103.

Tel: +91 80 6672 8000

Fax: +91 80 6672 8899

E – mail: mylan.india@mylan.in

Website: www.mylan.in

Escritório Registrado

Mylan Pharmaceuticals Private Limited,
Plot No.564/A/22, Road No.92,
Jubilee Hills, Hyderabad, Telangana,
India, 500096
CIN: U73100MH1997PTC106267

Para mais informações

por favor visite:

www.ez2uzhivselftest.com



Siga-nos no:



#ez2uzhivselftest